

GETINGE

Getinge 600シリーズ

トップロード・フラッシュャー・ディスインフェクター



“使う人に優しい製品”

“最新のテクノロジーを持つ製品”

これらを兼ね備えた“Getinge 600シリーズ”

“使いやすく技術的に完璧”なフラッシュャーディスインフェクターを開発することは、容易なことではありませんでした。GETINGEは、70年の間、世界中の病棟や手術部で数千に及ぶ課題を解決することにより、その両方を満たす製品の開発を実現しました。

今日、GETINGEはGetinge 600シリーズのような製品を開発することによって、この分野において世界のリーダーとなりました。

高性能なフラッシュャーディスインフェクターGetinge 600シリーズは、洗浄と消毒の優れた技術を持ち合わせた他に類のない使いやすく、作業する人と環境に優しい製品です。

トップローディング(上部積み込み)方式のGetinge 600シリーズフラッシュャーディスインフェクターは、以下の用途にご使用いただけます。

- 排出(汚物・汚水流し)
- 洗浄
- 消毒(蒸気による熱消毒)

Getinge 600シリーズを設置することにより、個別の汚水流しが必要ありません。

排出から洗浄・消毒までの行程を4-7分で行い、時間・スペース・コストを節約します。

使用が簡単

Getinge 600シリーズの特徴であるトップローディング方式は、前部が後部よりも低く設計されています。

そのため、洗浄槽が見やすく、積み込み、汚物・汚水流しの操作が容易です。

便利なフット・ペダルを標準装備

Getinge 600シリーズはフット・ペダルで蓋を開閉することができるため、手を汚すことなく操作ができます。頻繁に使用するプログラムは手を使わずにフット・ペダルを使用して開始させることができます。

優れた洗浄・消毒


固定ノズルと回転ノズルによって、激しく汚れた器具でも効率よく洗浄します。洗浄後は、全てのノズルから蒸気(最高設定温度93℃)が吹き出すPSD(パイプシステムディスインフェクション)システムによって器具のみならず洗浄槽、洗浄パイプやノズルも同時に消毒します。蒸気発生器を内蔵しているため、給排水、電源(200V)の設備で設置できます。また、本製品は2005年にスタートする欧州統一ガイドラインISO/EN 15883-3(ベッドパンウォッシャーの洗浄・消毒ガイドライン)に完全に準拠しています。

自動乾燥


洗浄・消毒行程が完了すると、自動的に蓋が10cm開きます。それによって乾燥が促進され、短時間で器具の乾燥および冷却を行います。

緑のランプが点灯して蓋が開くことで洗浄槽内の器具が清潔な状態で使用可能なことを示しています。

また、適切な処理工程が行われなかった場合には、赤いランプが点灯し、蓋は開きません。

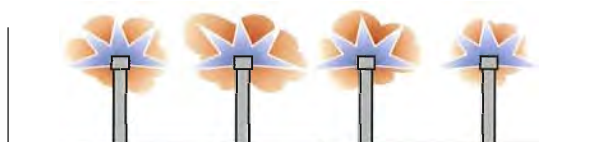

GETINGEのPSD(パイプシステムディスインフェクション)は、個々の洗浄ノズルから処理する器具に直接蒸気を噴射します。

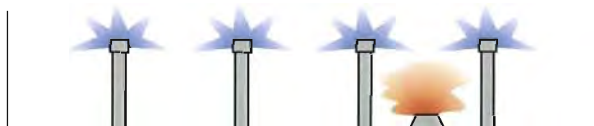

通常のフラッシュャーディスインフェクターやベッドパンウォッシャーでは、蒸気放出ノズルが中央に一つしか無いものが多く、ビンなどの内部に蒸気がかかりにくいことがあります。また、洗浄ノズルから蒸気が出ないことにより、ノズルが汚染するリスクがあります。



フット・ペダルは標準装備です



自動乾燥モード



ペダルを踏むことによって自動的に開閉します

斜めになった洗浄槽内
器具の積み込み、汚水流しが容易です。

深くて大きな洗浄槽
一体成型された深くて大きな洗浄槽は、折り曲げや溶接部分がなく、曲面でできているため、常に清潔な状態を保ちます。

汚物・汚水流し
マニュアルリムフラッシュ付き

効率的な消毒
蒸気が前部の洗浄ノズルから噴出するため、瓶などの用具の内部も効率よく消毒でき、同時に洗浄ノズルも消毒されます。

壁取り付け式または直立式(支柱なし)
直立式の設置では、床面も簡単に清掃できます。


フット・ペダル(標準装備)
手を使わずに蓋の開閉ができます。

フラッシュャーディスインフェクター Getinge 600シリーズ	
洗浄槽の容量	70 L
洗浄槽の高さ	400 mm
洗浄槽の幅	465 mm
洗浄槽の深さ	380 mm



自動排出時の回転機能(オプション)

吸入瓶や便器などの汚物を自動で排出します。投入した器具の汚物は、悪臭の発生を防ぐために蓋が閉まるまで汚物は排出されません(蓋を閉めると自動的に排出)。

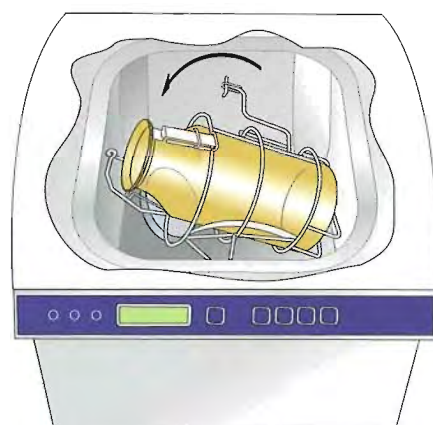

サクションボトル用のホルダー
2-5リットル、パーツ番号: 500 44 00-00



サクションボトルの追加ホルダー
0.7リットル、パーツ番号: 500 77 200
(パーツ番号: 500 44 00-00のホルダーに適合)



ベッドパンとハンドル用のホルダー
パーツ番号: 499 95 72-00

追加オプション

自動排出機能付き

- | | 〈パーツ番号〉 |
|---|---|
| • 下部アダプター | 500 11 39-00 |
| • 一般器具用のラック | 499 96 10-00 |
| • 器具用のスプリング | 499 11 16-00 |
| • 追加インジェクターパイプ | 500 06 33-00 |
| • サクションボトル用ホルダー: 2-5リットル | 500 44 00-00 |
| • 小型サクションボトル(0.7/1.2/2.0リットル)用アダプター
Engel, Mediada および Meddela | 500 07 72-00
(パーツ番号: 500 44 00-00のホルダーに適合) |
| • 小型サクションボトル(0.25-0.5 リットル)用のアダプター
Meddela, FMS | 500 05 16-00
(パーツ番号: 500 44 00-00のホルダーに適合) |
| • 丸形ベッドパン1個用のホルダー | 499 95 72-00 |
| • 丸形ベッドパンおよび尿器用 | 501 14 05-00 |

手動排出機能付き

- | | 〈パーツ番号〉 |
|---------------------|---|
| • 小型尿瓶用の吸引部 | 500 26 57-00
(パーツ番号: 501 14 05-00のホルダーに適合) |
| • 2リットルのサクションボトル/尿器 | 501 13 70-00
(パーツ番号: 501 14 05-00のホルダーに適合) |
| • 尿瓶3個用のホルダー | 499 95 71-00 |
| • 一般器具用のラック | 499 96 10-00 |
| • 器具用のスプリング | 499 11 16-00 |
| • 追加インジェクターパイプ | 500 06 33-00 |
| • サクションボトル用のアダプター | 499 99 99-00 |

Getinge 600シリーズ(病棟向け)



積み込み例



共通ホルダー
自動排出用(標準装備)



耐熱性プラスチックバケツ



ベース用ラック



ゲティンゲは、一貫性のあるデザインと機能を兼ね備えた独自の製品を提供しています。さらに、専門的なアドバイス、必要条件の分析、室内デザインのサポート、システムの設置、アフターサービス、ゲティンゲアカデミー講師による研修も提供しています。

GETINGE

マッケ・ゲティンゲ株式会社

インフェクション・コントロール事業部 ヘルスケア部

本社: 〒135-0063 東京都江東区有明3-1-22 TFTビル東館8階

Phone: (03) 3599-8366

Fax: (03) 3599-8365

enquiries-inco@getinge.com www.getinge.co.jp

GETINGE

ゲティンゲグループは、高品質とコスト効率を追求した製品を提供し続ける、ヘルスケアとライフサイエンスの分野で常に最先端を行く世界規模のグループです。患者の衛生、ケアと外傷のケアには**ARJO**、ヘルスケア部門、ライフサイエンス部門での感染管理と予防には**GETINGE**、そしてサージカルワークプレイス部門、人工心肺部門、重症ケア部門には**MAQUET**のブランドを以って機器、サービス、そして革新的なテクノロジーを提供しております。

販売代理店